



CARDIOS




01 02 03 04 05 06 07  
08 09 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30 31

# Cardio Seven

O Gravador Digital  
de Holter de 7 dias

não inclui acessórios  
**3**  
ANOS  
GARANTIA


# Chegou o mais avançado Gravador de Holter de até 7 dias!

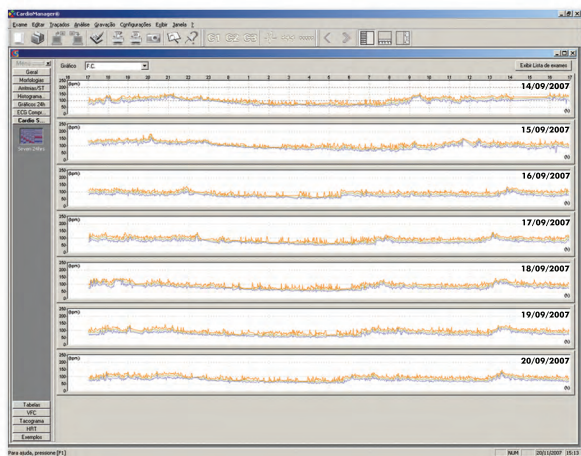

Frequência Cardíaca - FC



O **CardioSeven** é um Gravador Digital de Holter de última geração que permite a gravação contínua por 7 dias de 3 canais de ECG com 1 única pilha AAA (palito) alcalina.

Após o período de aquisição, o cartão SD pode ser removido do **CardioSeven** e colocado em uma leitora digital para análise do sinal através do **CardioSmart**. 

Gravação em SD Memory Card

Comunicação Leitora Digital



## Características Técnicas

- Tamanho 82 X 60 X 14 mm
- Peso 47 gramas
- Mídia utilizada Cartão SD ( Secure Digital) = 2 gramas
- Alimentação 1 pilha AAA (palito) Alcalina = 13 gramas
- Aquisição do sinal 800 pps. – 12 bits.

- Circuito de detecção de marca-passo
  - Relógio interno
  - Alarmes luminosos e sonoros
  - Emissor - Receptor Infravermelho
- Registro ANVISA/MS: 10361050008



Cardio Sistemas Indl. Coml. Ltda  
Av. Paulista, 509 Andar 1 Andar 2 Cj. 201, 212-214 01311-910 São Paulo SP  
Tel. Geral: 11 3883-3000 Fax 11 3883-3060  
Vendas: 11 3883-3030 SSC: 11 3883-3010  
[www.cardios.com.br](http://www.cardios.com.br)

38  
ANOS

