



# Cardio Loop




Ética e Responsabilidade

O CardioLoop é um Gravador de memória contínua para registro de eventos sintomáticos esporádicos.



Grava até 15 dias com uma única pilha AAA (palito)

A gravação é contínua, congelando e arquivando o último minuto anterior à marcação do evento e os 3 minutos seguintes.

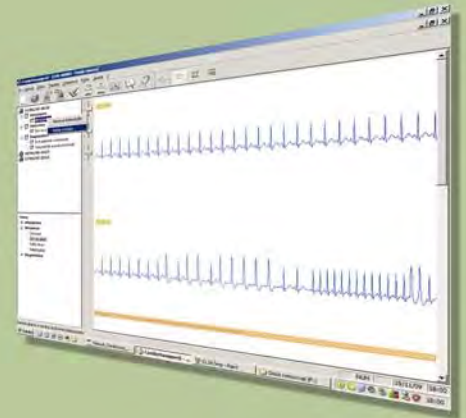


Transmite via internet através do software CardioNet Client para uma central de análise

Gravação em SD Memory Card

Comunicação Leitora Digital



Após a gravação, o cartão SD pode ser removido do CardioLoop e colocado em uma leitora digital para análise do sinal através do software CardioLoop 

## Características Técnicas

- Tamanho 82 X 60 X 14 mm
- Peso 46 gramas
- Mídia utilizada Cartão SD ( Secure Digital) = 2 gramas
- Alimentação 1 pilha AAA (palito) = 13 gramas Alcalina ou Recarregável
- Acessórios Cabo de paciente 2 vias / Cartão SD / Clip / Capanga / Pilhas Alcalinas
- Aquisição do sinal 800 pps. – 12 bits.
- Relógio interno
- Alarmes luminosos e sonoros
- Emissor - Receptor Infravermelho

Registro ANVISA/MS: 10361050011



Cardio Sistemas Indl. Coml. Ltda  
Av. Paulista, 509 Andar 1 Andar 2 Cj. 201, 212-214 01311-910 São Paulo SP  
Tel.Geral: 11 3883-3000  
11 3141-1010  
Fax: 11 3883-3060  
Vendas: 11 3883-3030  
SSC: 11 3883-3010  
www.cardios.com.br

38  
ANOS

